

Medizinisches Digital-Thermometer
Geratherm® easy temp GT-2052

Geratherm Medical AG
Deutschland

CE0197

D

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG DER TEILE

Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen.




DATEN	
Messbereich:	32,0 °C bis 43,9 °C (89,6 °F bis 111,1 °F) Unter 32,0 °C (89,6 °F) Anzeige „L“ (°C/°F) Über 43,9 °C (111,1 °F) Anzeige „H“ (°C/°F) Messung der Körpertemperatur 0,1 °C (°F) ± 0,1 °C von 34,0 °C bis 42,0 °C; ± 0,2 °C (anderer Bereich) Messgenauigkeit: ± 0,2 °F (93,2 °F bis 107,6 °F); ± 0,4 °F (anderer Bereich)
Verwendungszweck:	Flüssigkristallanzeige 3 ½ Stellen IP22
Auflösung:	ca. 117 mm x 30 mm x 16 mm ca. 20 g einschließlich Batterie
Messgenauigkeit:	Akustisches Signal von ca. 10 s, wenn kein relevanter Temperaturanstieg mehr fest-gestellt wird.
Anzeige:	Einbauter Speicher wodurch der zuletzt gemessene Wert angezeigt werden kann.
Batterie (beiliegend):	IP22
Energieverbrauch:	ca. 117 mm x 30 mm x 16 mm ca. 20 g einschließlich Batterie
Lebensdauer der Batterie:	Akustisches Signal von ca. 10 s, wenn kein relevanter Temperaturanstieg mehr fest-gestellt wird.
Schutzgrad:	IP22
Abmessungen:	Temperatur: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % R.H.
Gewicht:	Es ist nur die Messung von Temperaturen möglich, die über der Umgebungs-temperatur liegen.
Signal:	Temperatur: -25 °C bis +55 °C, (-13 bis 131°F) Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % R.H.
Speicher:	Die Thermometer erfüllen die Forderungen der EN 12470-3 (Elektrische Kompakt-thermometer mit Maximumvorrichtung) mit Ausnahme von 6.3.7 (Wasserdichtheit).
Betriebsbedingungen:	Geratherm® ist zertifiziert nach Richtlinie 93/42/EWG und EN ISO 13485 und berech-tigt zur Anbringung der Kennzeichnung CE0197 (Benannte Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):	Bei dem vorliegenden Medizinprodukt handelt es sich um ein Gerät mit extrem hohem Maß an Störfestigkeit. Deshalb wird auf den Druck des Anhangs der EMV-Tabellen verzichtet.

SICHERHEITSHINWEISE

- Für beste Messergebnisse, benutzen Sie das Thermometer nicht für die axilläre Messung. Benutzen Sie es nur für die orale oder rektale Messung.
- Die Benutzung eines Thermometers ist kein Ersatz für einen Arztbesuch. Anhaltendes Fieber, besonders bei Kindern, muss ärztlich behandelt werden. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung!
- Die Temperatur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen messen.
- Das Thermometer außer Reichweite von Kindern halten. Kleinkinder können sich vom Thermometer ablösen. Diese können von Kindern verschluckt werden oder es besteht Erstickungsgefahr durch Einatmung der Teile.
- Dieses Thermometer nicht kochen, nicht darauf beißen, nicht biegen, nicht fallen lassen oder auseinander nehmen.
- Öffnen Sie niemals das Thermometer außer zum Wechseln der Batterie.
- Temperaturmessungen innerhalb von 30 Minuten nach sportlicher Betätigung, nach dem Baden oder Essen vermeiden.
- Thermometer beim Gebrauch, bei der Aufbewahrung oder beim Transport nie direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen und vor Schutz zu schützen.
- Thermometer nicht mehr verwenden, wenn es unregelmäßig arbeitet oder die Anzeige defekt ist.
- Vor dem Gebrauch das Thermometer auf Zimmertemperatur erwärmen lassen, wenn es bei erheblich niedrigeren Temperaturen aufbewahrt wurde.


BATTERIEWECHSEL

- Wenn das Symbol „“ erscheint, muss die Batterie ausgewechselt werden.
- Die Batterieabdeckung vom Thermometer abziehen.
- Verwenden Sie einen Zahnstocher o. ä., um die Batterieabdeckung und die alte Batterie zu lösen. Vermeiden Sie dabei scharfe Metallgegenstände.
- Setzen Sie in das Batteriefach eine neue Batterie ein.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und befestigen Sie diese sicher.

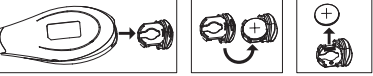

Achtung: Halten Sie die Thermometer und Batterien von Kleinkindern fern. Falls die Batterie verschluckt wurde, nehmen Sie sofort Kontakt mit einem Krankenhaus auf. Die Batterie nicht ins Feuer werfen, sie könnte explodieren.

ANWENDUNG

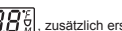- Desinfizieren Sie den Messfühler vor dem Gebrauch mit Ethylalkohol (zum Einreiben).
- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste. Auf der Anzeige erscheint  oder , zusätzlich erscheint der Fieberalarm in grün, gelb und rot.
- Lassen Sie die EIN-/AUS-Taste los und auf der Anzeige erscheint „L“ (°C/°F), wobei „C“ (°F) blinkt.
- Positionieren Sie den Messfühler (oral, rektal oder axillär).
- Sobald das Thermometer keine relevante Temperaturanstieg mehr feststellt, hört „C“ (°F) auf zu blinken, und der bis dahin gemessene Maximalwert wird angezeigt, wobei eine Reihe von Signalen zu hören ist. Die Anzeige leuchtet in der entsprechenden Farbe des Fieberalarms auf. (grün, gelb, rot).
- Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollte das Thermometer jedoch durch Drücken der EIN-/ AUS-Taste ausgeschaltet werden, nachdem die Temperatur notiert wurde.

BESONDERE MERKMALE

Normaltemperatursignal: Es ertönt ein Signal, wenn die Maximaltemperatur erreicht wurde und angezeigt wird. Das „Normaltemperatursignal“ (vier kurze Pieptöne, gefolgt von einer Pause) wird etwa 5 Sekunden lang wiederholt.

Abruf des letzten Messwerts: Wenn die EIN-/AUS-Taste gedrückt wird, um das Thermometer zu aktivieren, des letzten 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige 188,8 ändert sich, um die zuletzt gemessene Temperatur anzuzeigen. Dieser Ablesewert wird so lange angezeigt, wie die Taste gedrückt gehalten wird. Wird die Taste losgelassen, ist das Thermometer im „Messbereitschaftsmodus“ und die abgeurtene Temperatur wird geltscht.

Fieberindikator: Falls die Temperatur mehr als 37,5 °C (99,5 °F) beträgt, ertönt das Fieberindikatorsignal (ein schneller Piepton, der etwa 5 Sekunden lang kontinuierlich anhält).

Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit: Schalten Sie das Thermometer ein und drücken und halten Sie die EinAus-Taste für 2 Sekunden. Um die gewünschte Maßeinheit (°C oder °F) zu speichern, müssen Sie einen Messvorgang vollständig durchführen.

ANMERKUNG: Sie können eine hygienische Einmalmülle auf den Messfühler stecken, um Virenübertragung zu vermeiden. Bei Verwendung von Einmalmüllen kann es zu Abweichungen von der tatsächlichen Temperatur von 0,1 °C (0,2 °F) kommen. Entsorgen Sie die Einmalmüllen nach dem Messen.

MESSMETHODEN

Es ist nur die Messung von Temperaturen möglich, die über der Umgebungstemperatur liegen.

ORAL
Stecken Sie den Messfühler weit unter die Zunge des Patienten. Weisen Sie den Patienten an, den Mund geschlossen zu halten. Die Normaltemperatur bei dieser Methode beträgt zwischen 36,0 °C und 37,5 °C (96,8 °F und 99,5 °F).

REKTAL
Falls Ihr Arzt eine rektale Temperaturmessung empfiehlt, können Sie eine Schutz-hülle für den Messfühler verwenden. Stecken Sie das Thermometer in diese Schutzhülle. Reiben Sie die Schutzhülle für den Messfühler mit einem wasserlöslichen Gel ein, um das Einführen zu erleichtern. Verwenden Sie keine Vaseline. Führen Sie die Spitze des Messfühlers nicht weiter als 1,5 cm in das Rektum ein. STOPPEN Sie, falls Sie irgendeinen Widerstand spüren. Die Rektaltemperatur ist im Allgemeinen etwa 0,5 °C bis 1,0 °C (1,0 °F bis 2,0 °F) höher als die Oraltemperatur.

AXILLAR
Reiben Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Handtuch ab. Stecken Sie den Messfühler in die Achselhöhle des Patienten und sorgen Sie dafür, dass dessen Arm fest an die Körperseite angepresst wird. Die Axillartemperatur ist im Allgemeinen etwa 0,5 °C bis 1,0 °C (1,0 °F bis 2,0 °F) niedriger als die Oraltemperatur.

Falls Sie Temperaturen zwischen zwei Thermometern vergleichen, ist es möglich, dass Sie zwei unterschiedliche Werte angezeigt bekommen, selbst wenn beide Thermometer innerhalb ihrer Genauigkeitstoleranz liegen. Es gibt Unterschiede bei jeder Messung und der Toleranzbereich des Thermometers kann eine Differenz von fast 0,1°C (0,2 °F) ausmachen.

EMPFEHLUNG: Ermitteln Sie Ihre Normaltemperatur und achten Sie auf Veränderungen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Beim Hausgebrauch den Messfühlerkopf stets vor und nach jeder Benutzung reinigen.
Wischen Sie den Messfühlerkopf mit einer Lösung aus milder Seifenlösung und kaltem Wasser ab.
Desinfizieren Sie das Thermometer, indem Sie den Sensor und den unteren Abschnitt des Gehäuses mit einem Tuch abwischen, das zuvor in Alkohol (Empfehlung: Isopropylalkohol 70 %) getaucht wurde.
Das Thermometer nicht abkochen und nicht im Autoklav reinigen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung des Thermometers sowie der Batterien sind die jeweils gültigen Vorschriften zu beachten. Dieses Thermometer darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umwelt-schonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Thermometer entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel.

GARANTIE

Auf dieses Thermometer wird bei normaler Anwendung für zwei Jahre ab dem Kaufdatum eine Garantie für etwaige Fehler seitens des Herstellers gewährt. Falls Ihr Gerät aufgrund fehlerhafter Teile oder Montage nicht richtig funk-tioniert, reparieren wir es kostenlos. Mit Ausnahme der Batterie unterliegen alle Teile des Gerätes dieser Gewähr-leistung. Durch unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden an Ihrem Gerät unterliegen nicht der Gewähr-leistung. Bei professioneller Anwendung wird empfohlen, das Gerät alle 2 Jahre von einer autorisierten Labor mes-s-technik überprüfen zu lassen (in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben).

SYMBOLINDEX

	Gebrauchsanweisung befolgen		Geräteklassifikation Typ BF
	vor Nässe schützen		Hersteller
	Lagerung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 15 % und 95 % R.H.		Achtung, Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten.
	Lagerung zwischen -25 °C und +55 °C		Chargenbezeichnung (mm/yyyy; Monat/Jahr)
	Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.		Geratherm Medical AG Fahrenheitstrasse 1 98716 Geschwenda Deutschland www.geratherm.com

Medical digital thermometer
Geratherm® easy temp GT-2052

Geratherm Medical AG
Germany


CE0197

B

INSTRUCTION FOR USE

DESCRIPTION OF PARTS

Please read carefully before using

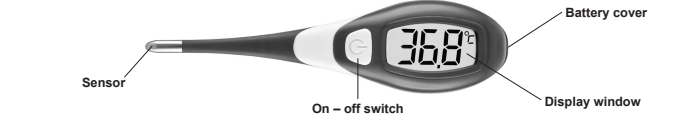


SPECIFICATIONS	
Range:	32,0 °C to 43,9 °C (89,6 °F to 111,1 °F) Below 32,0 °C (89,6 °F) display „L“ (°C/°F) Above 43,9 °C (111,1 °C) display „H“ (°C/°F) Measurement of body temperature 0,1 °C (°F) ± 0,1 °C (34,0 °C to 42,0 °C); ± 0,2 °C (other range) Accuracy: ± 0,2 °F (93,2 °F to 107,6 °F); ± 0,4 °F (other range)
Intended use:	Liquid crystal display 3 1/2 digits CR1225 (3 V)
Resolution:	0,4 mW in measurement mode
Accuracy:	More than 160 hours of continuous operation
Display:	IP22 (effective against solid foreign objects with a finger; protected against dripping water)
Battery (included):	117 mm x 30 mm x 16 mm Approx. 20 grams including battery
Power consumption:	Approx. 10 second sound signal when no relevant increase in temperature is detected
Battery life:	Built-in memory enabling display of the previously measured value
IP classification:	Temperature: 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) Humidity: 15 % to 95 % R.H.
Dimensions:	It is only possible to measure temperatures that are above the ambient tem-perature.
Weight:	Temperature: -25 °C to +55 °C (-13 °F to 131 °F) Humidity: 15 % to 95 % R.H.
Beeper:	The thermometers meet the requirements of EN 12470-3 (Electrical Compact Ther-mometer, maximum), with the exception of 6.3.7 (water resistance).
Memory:	Geratherm® is certified in accordance with Council Directive 93/42/EEG and EN ISO 13485 and is entitled to affix the CE-mark CE0197 (Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
Working Conditions:	The present medical product is a device with extremely high degree of noise immu-nity. Therefore, the enclosure with the EMC tables was not printed out.
Storage Conditions:	
Guarantee of Quality:	
Electromagnetic compatibility (EMC):	

PRECAUTIONS

- For best results, do not use the thermometer for Axillary measurement. Use it only for oral or rectal measurement.
- Use of this instrument is not intended as a substitute for consultation with your physician. Prolonged high fever requires medical attention especially for your children. Please contact your physician.
- Child's temperature shall be taken under adult's surveillance.
- Keep out of the reach of unsupervised children. Choking resulting from a child swallowing a small part that has become detached from the thermometer.
- Do not boil, bite, bend, drop or disassemble this thermometer.
- Do not attempt to disassemble the unit except to replace the battery.
- Avoid taking temperature in 30 minutes after physical exercises, bathing or dining.
- Do not store, use and transport the unit under direct sunlight, at a high temperature, or in high humidity or dust. Performance may be degraded.
- Stop using the thermometer if it operates erratically or if the display malfunctions.
- If the thermometer has been stored at below-freezing temperatures, allow the thermometer to warm naturally to room temperature before using.


BATTERY REPLACEMENT

- When the symbol „“ appears, the battery needs to be replaced.
- Put the battery cover and the plug off in the direction as shown.
- Use a toothpick or insulated probe to remove the battery. Avoid using any sharp metal ob-ject in this operation.
- Place a new battery type with positive side up and the negative side facing down.
- Turn the battery module and put it back into the thermometer.

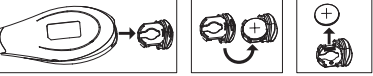

Discard old battery carefully, out of reach of young children. Do not dispose of the battery in a fire. It may explode.

HOW TO USE

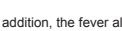- Clean or disinfect the probe before every measurement with Ethyl.
- Press the ON/OFF button. The display will show  or , in addition, the fever alarm will ap-pear in green, yellow and red.
- Release the power switch and the display will show „L“ (°C/°F) with „C“ (°F) flashing.
- Position the probe (oral, rectal, axillary etc.).
- As soon as the thermometer does not register any further relevant increase in temperature, „C“ (°F) stops flashing and the maximum value measured up to that time is shown, accompanied by a series of audible signals. The indicator lights up in the corresponding color of the fever alarm. (green, yellow, red).
- The unit will automatically turn off in 30 seconds (approx.). However, to prolong battery life, it is best to turn the thermometer off by pressing the ON/OFF button once the temperature has been noted.

Temperatur (°C)	Temperatur(°F)	Fever alarm indicator
35,9 ± T	96,7 ± T	clear
36,0 ± T + 37,1	96,8 ± T + 98,8	green
37,2 ± T + 37,4	98,9 ± T + 99,4	yellow
37,5 ± T + 43,9	99,5 ± T + 111,1	red
43,9 ± T	111,2 ± T	clear

SPECIAL FEATURES

Normal Temperature Alarm: An alarm will sound when the maximum temperature has registered and is ready-to-read. The „Normal Temperature“ alarm (four quick beeps followed by a pause) will sound repeatedly for approxi-mately 5 seconds.

Last Memory Recall: If the ON/OFF button is pressed to activate the thermometer, hold the button for 2 seconds. The display 188,8 changes to show the last measured temperature. This reading is displayed as long as the button is held down. When released, the thermometer is in "ready-to-measure" mode and the recalled temperature will be deleted.

Fever Alarm: If the temperature registers higher than 37,5 °C (99,5 °F) the fever alarm (a quick beeping sound which occurs continuously for about 5 seconds) will sound when the peak temperature has registered. Also, the temperature will keep flashing.

Switch between Celsius and Fahrenheit: After turning on the thermometer, the Centigrade or Fahrenheit mode can be switched within the first 5 seconds by pressing and holding the ON/OFF button for 2 seconds.

NOTE: You may put a sanitary plastic probe shield on the sensor tip to help prevent cross-infection and recon-tamination. Use of the probe cover may result in a 0,1 °C (0,2 °F) difference from actual temperature. Dispose of any used probe shield and store the unit in a safe place.

MESSMETHODEN

It is only possible to measure temperatures that are above the ambient temperature.

ORAL USE
Place the probe well under the patient's tongue. Instruct the patient to keep their mouth closed .
A normal temperature by this method is usually considered between 36,0 °C and 37,5 °C (96,8 °F and 99,5 °F).

RECTAL USE
If rectal temperature is recommended by your doctor, you may use a probe cover. Insert thermometer into the probe cover. Lubricate the probe cover with a water soluble jelly for easier insertion.
Do not use petroleum jelly. Insert tip of probe no more than 1,5 cm into rectum.
STOP if you meet any resistance. In general, the rectal temperature is around 0,5 °C to 1,0 °C (1,0 °F to 2,0 °F) higher than oral temperature.

AXILLARY USE
Wipe armpit with a dry towel. Place probe in the patient's armpit and keep the patient's arm pressed firmly against their side.
In general, the axillary temperature is around 0,5 °C to 1,0 °C (1,0 °F to 2,0 °F) lower than oral temperature.

If you compare temperatures between two thermometers, it is possible to have two different readings even if both thermometers are within their accuracy tolerances. Differences in how you take each reading and the thermom-eter's tolerance range can account for nearly 0,1 °C (0,2 °F) variability.

REMEMBER: Find your normal temperature and watch for changes.

CLEANING AND DISINFECTION

For household use, always clean the probe head before and after each use.
Wash the tip with a solution of mild detergent and cool water.
Disinfect the thermometer by wiping the sensor and lower stem with a cloth dipped in a household antiseptic solution such as rubbing alcohol (recommendation: 70 % isopropyl alcohol).
Do not boil or clean in autoclave.

DISPOSAL

Observe the applicable regulations when disposing of the thermometer and batteries. This thermometer must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regard-less of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.
Please remove the batteries before disposing of the thermometer.
Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop.

LIMITED WARRANTY

This thermometer is guaranteed for two years from the date of purchase against manufacturer's defect under normal use. If your unit does not function properly due to defective parts or assembly we will repair it free of charge. All parts are covered by this warranty excluding the battery. The warranty does not cover damage to your unit due to improper handling. We recommend that the accuracy of the unit be checked every 2 years by an authorized laboratory.

SYMBOL INDEX

	Follow instructions for use		Type BF applied part
	Keep dry		Manufacturer
	Store between 15 % and 95 % R.H.		Caution! Read the instruc-tion manual.
	Store between -25 °C and +55 °C		Batch code (mm/yyyy; month/ year)
	The device must not be dis-posed of with household waste.		Geratherm Medical AG Fahrenheitstrasse 1 98716 Geschwenda Germany www.geratherm.com

Thermomètre médical numérique
Geratherm® easy temp GT-2052

Geratherm Medical AG
Allemagne

CE0197

F

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

Lire attentivement la notice avant utilisation




DONNÉES	
Domaine de mesure:	32,0 °C à 43,9 °C (89,6 °F à 111,1 °F) Inférieure à 32,0 °C (89,6 °F) affichage „L“ (°C/°F) Supérieure à 43,9 °C (111,1 °F) affichage „H“ (°C/°F) Mesure de la température du corps 0,1 °C (°F) ± 0,1 °C de 34,0 °C à 42,0 °C; ± 0,2 °C (autre domaine) Précision de mesure: ± 0,2 °F (93,2 °F à 107,6 °F); ± 0,4 °F (autre domaine)
Domaine d'application:	Affichage à cristaux liquides 3 ½ positions CR1225 (3 V)
Résolution:	0,4 mW pendant la mesure
Durée de vie des piles:	Plus de 160 heures de fonctionnement continu
Degré de protection:	IP22
Dimensions:	env. 117 mm x 30 mm x 16 mm
Poids:	env. 20 g piles incluses
Signal:	Signal acoustique d'env. 10 s, si aucune augmentation de température pertinente n'est constatée.
Mémoire:	Mémoire incluse affichant la dernière valeur mesurée
Conditions de fonctionnement:	Température: 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) Humidité: 15 % à 95 % humidité relative
Conditions de conservation:	Ce produit est seulement prévu pour afficher la température supérieure à la température ambiante.
Garantie qualité:	Température: -25 °C à +55 °C, (-13 °F à 131 °F) Humidité: 15 % à 95 % humidité relative
Compatibilité électromag-nétique Compatibilité (CEM):	Les thermomètres satisfont aux exigences de la norme EN 12470-3 (Thermo-mètres électriques compacts avec dispositif à maximum) à l'exception de 6.3.7 (Étanchéité à l'eau). Geratherm® est certifié selon les directives 93/42/CEE et ISO 13485 et est autorisé à apposer le marquage CE0197 (organisme connu TÜV Rheinland LGA Products GmbH).
	Le présent produit médical est un appareil qui présente une extrême résistance aux perturbations magnétiques. C'est pourquoi l'impression de la pièce jointe sur les tableaux CEM n'est pas nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser le thermomètre pour une mesure axillaire. Utilisez-le seulement par voie orale ou rectale.
- L'utilisation du thermomètre ne remplace pas la consultation chez le médecin. Consultez votre médecin en cas de fièvre persistante, notamment chez les enfants. Veuillez contacter votre médecin !
- Mesurer la température de l'enfant sous la surveillance d'un adulte.
- Conservier le thermomètre hors de la portée des enfants. Des petits composants peuvent se détacher du thermo-mètre. Ils peuvent être avalés par les enfants ou présenter un danger d'étouffement causé par l'ingestion des composants.
- Ne pas faire bouillir, mordre, piler, faire tomber ou démonter le thermomètre.
- Ne jamais ouvrir le thermomètre sauf pour remplacer les piles.
- Eviter de mesurer la température dans les 30 minutes suivant une activité physique, un bain ou un repas.
- Ne jamais exposer le thermomètre aux rayons du soleil, à l'humidité ou à des températures extrêmes et protéger de la poussière.
- Ne plus utiliser le thermomètre s'il n'est pas utilisé régulièrement ou si l'affichage est défectueux.
- Laisser le thermomètre à température ambiante s'il a été conservé à des températures particulièrement basses.

REPLACEMENT DES PILES

- Les batteries doivent être remplacées lorsque le symbole «  » apparaît.
- Tirez le couvercle du compartiment à piles et ôtez le module des piles.
- Utilisez un objet pointu pour ôter les piles. Évitez les objets pointus en métal.
- Placez les piles neuves dans le compartiment à piles. Le pôle négatif (-) doit être dirigé vers le bas et le pôle positif (+) vers le haut.
- Tournez le module de piles et remplacez-le dans le thermomètre.

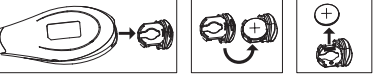

A conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu, elles pourraient exploser !

UTILISATION

- Désinfecter le capteur de mesure avant chaque usage avec de l'alcool éthylique (à appliquer).
- Presser le bouton MARCHÉ/ARRÊT.  ou  apparaît sur l'écran et une alerte fièvre apparait en vert, jaune ou rouge.
- Lâcher le bouton MARCHÉ/ARRÊT et „L“ (°C/°F) apparaissent sur l'écran, „C“ (°F) clignote.
- Positionnez le capteur de mesure (voie orale, rectale ou axillaire).
- Dès que le thermomètre ne détecte plus de hausse de température, „C“ (°F) cesse de clignoter et la mesure maximale mesu-rée est affichée, accompagnée d'une sé-rie de signaux sonores. L'écran s'allume dans la couleur correspondante de l'alerte fièvre (vert, jaune, rouge).
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. Afin de prolonger la durée de vie des piles, le thermomètre doit être éteint en pressant sur MARCHÉ/ARRÊT une fois que la température a été relevée.

Temperatura (°C)	Temperatura (°F)	Indicatore allarme febbre
35,9 ± T	96,7 ± T	incolore
36,0 ± T + 37,1	96,8 ± T + 98,8	vert
37,2 ± T + 37,4	98,9 ± T + 99,4	jaune
37,5 ± T + 43,9	99,5 ± T + 111,1	rouge
43,9 ± T	111,2 ± T	incolore

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Signal de température normale: Un signal sonore est activé lorsque la température maximale est atteinte et affichée. Le signal de température normale (quatre signaux brefs suivis d'une pause) est répété pendant environ 5 secondes.

Consultation de la dernière valeur mesurée: Presser le bouton MARCHÉ/ARRÊT pendant 2 secondes pour activer le thermomètre. L'affichage 188,8 est modifié et l'écran affiche la dernière température mesurée. Cette valeur mesurée est affichée le temps de la pression exercée sur le bouton. Lorsque le bouton est lâché, le thermomètre est prêt à mesurer et la température affichée est supprimée.

Indicateur de fièvre: Si la température dépasse 37,5 °C (99,5 °F) le signal indicateur de fièvre sonne (un bref signal qui dure environ 5 secondes en continu).

Passer de Celsius à Fahrenheit: Allumez le thermomètre et appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Pour enregistrer l'unité de mesure (°C ou °F), vous devez effectuer une mesure intégrale.

REMARQUE : Vous pouvez placer un étui à usage unique sur le capteur de mesure afin d'éviter les transmis-sions virales. L'utilisation d'étui à usage unique peut entraîner des divergences de températures effectives de 0,1 °C (0,2 °F). Éliminez les étuis à usage unique après une que la température a été mesurée.

MÉTHODES DE MESURES

Ce produit est seulement prévu pour afficher la température supérieure à la température ambiante.

ORAL
Introduisez le capteur de mesure sous la langue

