

WARTNER®

Gegen Fußwarzen

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WARTNER® DIE AUSFÜHRlichen INFORMATIONEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH.

A. Wie funktioniert Wartner® gegen Warzen?

Bei Wartner® kommt die gleiche Methode zum Einsatz, die auch von Ärzten angewendet wird: Die Vereisung.

1. Wartner® vereist die Warze sofort bis auf die Wurzel. Wenn Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze drücken, verfärbt sich diese weiß und es entsteht ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl als Folge der Vereisung. Nachdem der Applikator entfernt worden ist, nimmt die Haut nach und nach wieder ihre natürliche Farbe an. Das schmerzende, stechende Gefühl wird ebenfalls schnell nachlassen und innerhalb von max. 24 Stunden ganz verschwinden.
2. Nachdem die Hautstelle wieder "aufgetaut" ist und ihre ursprüngliche Farbe angenommen hat, kann eine Rötung von der Größe der vereisten Fläche auftreten. Die Vereisung kann innerhalb weniger Tage auch zur Entstehung einer Blase unter der Warze führen. Diese ist unter Umständen für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die vereiste Warze wird nach und nach verschwinden oder nach 10 - 14 Tagen komplett abfallen. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.



B. Nebenwirkungen:

- Wie bei allen Vereisungsmethoden kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
- Es ist wichtig, dass das Produkt vorschriftsmäßig angewendet wird, da die Vereisung bei unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachten der Anwendungshinweise zu intensiv sein kann. Dies kann zu Narben, Nervenschädigungen und/oder Gewebeschädigungen (Nekrosen) führen.
- Wenn das gesunde Gewebe an den Fingern bzw. Zehen mit dem Produkt in Kontakt kommt (welches durch eine länger als angegebene Vereisung vorkommen kann), kann dies ein lokales Absterben des Gewebes zur Folge haben.
- In seltenen Fällen kann sich eine größere Blase bilden, die unter Umständen schmerzhaft sein kann.
- Nachdem die Warze abgefallen ist, können Pigmentverluste entstehen und eventuell kleine Narben zurückbleiben.
- Durch die Verwendung von Wartner® kann es aufgrund der tiefen Vereisungstemperatur zu leichten Verbrennungen kommen und obwohl von diesen Nebenwirkungen berichtet wurde, sind sie relativ selten aufgetreten.
- Wartner® sollte unbedingt entsprechend dieser Gebrauchsanweisung angewendet werden, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.

C. In bestimmten Fällen sollten Sie Wartner® nicht anwenden:

Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung von Wartner® zuerst einen Arzt.

Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, sollte aber nur von Erwachsenen angewendet werden. Wartner® sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen angewendet werden, die am Raynaud-Syndrom leiden. Falls Sie Diabetiker sind, sollten Sie Wartner® nicht anwenden, da das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann. Personen mit schlechter Durchblutung sollten ihren Arzt befragen, bevor sie Wartner® anwenden.

Das vorliegende Wartner® Produkt ist zur Anwendung an Füßen bestimmt. Nicht auf empfindlicher oder dünner Haut (wie zum Beispiel Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Brust, Gesäß oder Genitalien) anwenden. Nicht auf gereizter Haut anwenden oder an Stellen, die gerötet sind bzw. Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen vorweisen. Nicht auf dunklen Muttermalen, auf dunkel gefärbten, behaarten oder ungewöhnlich aussehenden Hauterkrankungen, die ähnlich wie gewöhnliche Warzen aussehen, anwenden. Nicht für die Behandlung von Polypen geeignet.

D. Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie einen Arzt.
- Nur zur äußerlichen Anwendung; nicht schlucken oder inhalieren und nur in gut belüfteten Räumen anwenden.
- Waschen Sie sich unmittelbar nach der Anwendung die Hände (abgesehen von der behandelten Stelle).
- Benutzen Sie Wartner® nur zusammen mit den beigefügten Schaumstoffapplikatoren.
- Benutzen Sie für jede Warze einen neuen Schaumstoffapplikator und benutzen Sie jeden Applikator nur einmal.
- Falls die Warze auf dem Fußrücken sitzt, bewegen Sie während der Behandlung langsam die Zehen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der gesunden Haut, die die Warze umgibt. Diese kann zum Beispiel durch Vaseline oder durch eine fettthaltige Salbe geschützt werden.
- Üben Sie während der Vereisung keinen übermäßigen Druck auf den Applikator aus.
- Tupfen Sie das die Warze umliegende Gewebe nicht ab.
- Der Applikator sollte für max. 40 Sekunden auf die Warze gesetzt werden. Sollte sich die umliegende Haut vorher weiß verfärben, entfernen Sie den Applikator von der Haut.
- Wenn mehrere Warzen auf dem Fuß oder den Zehen dicht beieinander liegen, darf nur jeweils eine Warze behandelt werden. Die übrigen Warzen sind einzeln im Abstand von 2 Wochen zu behandeln.
- Alte und große Warzen lassen sich mitunter nur schwer entfernen, daher ist in diesem Fall oftmals mehr als eine Anwendung erforderlich.
- Falls mehr als eine Anwendung nötig sein sollte, wiederholen Sie die Behandlung nach 2 Wochen. Insgesamt darf die Warze nicht mehr als 3-mal mit Wartner® behandelt werden. Wenn nach 3 Behandlungen noch kein Ergebnis erzielt wurde, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Ablaufdatum und Losnummer sind auf der Verpackung und der Unterseite der Sprühdose zu finden.
- GEFAHR: Wartner® enthält extrem leicht entflammbare Inhaltsstoffe: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht Rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquelle sprühen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Behälter steht unter Druck: kann bei Erhitzung bersten.
- Die Spraydose nicht aufbrechen oder verbrennen. Wenden Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Raum an und halten Sie mindestens 1m Abstand zu Feuer, einer offenen Flamme, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, elektrostatischen und elektrischen Quellen einschließlich Licht. Nicht in der Nähe rauchen oder in die Nähe von glühenden Zigaretten halten.
- Bewahren Sie Wartner® an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur vollständig entleerte Spraydosen in den Hausmüll geben. Nicht vollständig entleerte Spraydosen gesondert entsorgen.

E. Eine Packung Wartner® enthält:

- 1 Spraydose mit einem Gemisch aus Dimethylether und Propan, welches nicht umweltschädlich ist.
- 1 wiederverwendbaren Plastikhalter für die Schaumstoffapplikatoren.
- 12 Einweg-Schaumstoffapplikatoren für je eine Behandlung mit Wartner®.
- 1 wiederverwendbare Hornhautfeile
- 12 Komfortpflaster
- Diese Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen über Wartner®, wie es funktioniert und erfolgreich eingesetzt werden kann, um Fuß- bzw. Dornwarzen zu entfernen.

F. Gebrauchsanweisung:

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die ausführlichen Informationen in dieser Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch.

10-14 Tage nach der Behandlung mit Wartner® sind die Warzen normalerweise verschwunden. Alte und große Warzen benötigen mitunter mehr als eine Behandlung. Falls die Warze oder ein Teil davon nach 14 Tagen noch da ist, kann die Behandlung ohne Bedenken wiederholt werden. Benutzen Sie für jede Behandlung einen neuen Applikator und werfen Sie ihn anschließend weg. Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls nach 3 Behandlungen noch keine Verbesserung eingetreten ist.

Omega Pharma International nv, Venecoweg 26,
9810 Nazareth, Belgium
Vertrieb: Omega Pharma Deutschland GmbH,
Benzstraße 25, 71083 Herrenberg
Besuchen Sie uns im Internet: www.weg-mit-warzen.de

Stand der Informationen: Oktober 2015

EINFACHE ANWENDUNG IN 6 SCHRITTEN



SCHRITT 1.

Tauchen Sie den Fuß mit der Warze für 5 Minuten in warmes Wasser und bearbeiten Sie anschließend die Hornhaut mit der beiliegenden Hornhautfeile, um die Warze freizulegen.




SCHRITT 2.

Nehmen Sie den Schaumstoffapplikator an der blauen Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie darauf, bis eine kleine Öffnung sichtbar wird. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis der Stift nicht mehr sichtbar ist.

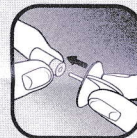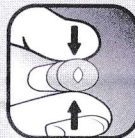

SCHRITT 3.

Halten Sie die Spraydose vorzugsweise in einer aufrechten Position in einem Abstand zu Ihrem Körper. Achten Sie darauf, dass die Spraydose nicht in der Nähe von glühenden Flammen und jeglichen elektrischen Quellen befindet. Vermeiden Sie außerdem direkte Sonneneinstrahlung. Stecken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator in die Öffnung auf der Deckeloberseite der Spraydose, bis der Schaumstoffapplikator nicht mehr sichtbar ist. Halten Sie die Spraydose mit einer Hand gut an der Unterseite fest, während Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze drücken. Zählen Sie die Sekunden (von 21 bis 23) mit der anderen Hand. Ziehen Sie anschließend den Halter mit dem Schaumstoffapplikator aus der Spraydose. Der Schaumstoffapplikator hat sich jetzt mit kalter Flüssigkeit vollgesaugt und es entsteht ein Kondensat. Dieses Kondensat ist unschädlich.

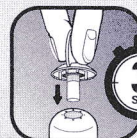

SCHRITT 4.

Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem Sie den Plastikhalter aus der Dose entnommen haben.



SCHRITT 5.

Nachdem Sie die 20 Sekunden abgewartet haben, drücken Sie den Plastikhalter mit der weißen Spitze des Schaumstoffapplikators auf die Warze. Stellen Sie dabei einen anhaltenden Kontakt mit der zu behandelnden Stelle sicher. Sie sollten den Schaumstoffapplikator für die gesamte Zeit auf die Warze drücken. Aufgrund der Vereisung wird ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl entstehen. Warten Sie nach der Behandlung 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffapplikator aus der Spraydose abziehen. Werfen Sie den Schaumstoffapplikator nach einmaliger Verwendung weg. Verwenden Sie den Schaumstoffapplikator nicht wieder und berühren Sie seine Spitze nicht mit bloßen Händen, um eine Neuinfektion zu vermeiden.



SCHRITT 6.

Benutzen Sie ein Komfortpflaster, um die empfindliche Stelle nach der Behandlung zu schützen. Bringen Sie das Pflaster mit der klebrigen Seite so auf der Haut an, dass sich das Loch in der Mitte direkt über der vereisten Stelle befindet.



G. Nachbehandlung:

- Halten Sie die behandelte Stelle sauber.
- Schwimmen und Duschen ist erlaubt.
- Nicht an behandelten Warzen kratzen oder knibbeln.
- Falls nötig, schützen Sie Blasen mit einem Pflaster und schneiden Sie diese keinesfalls auf.
- Falls das schmerzende, stechende Gefühl anhält oder sich verschlimmert, konsultieren Sie Ihren Arzt.