

MediGel®

SCHNELLE WUNDHEILUNG*



Hydroaktives Lipogel mit Zink und Eisen.

* im Vergleich zur alleinigen Abdeckung mit einem Pflaster bei kleinen Verletzungen im Alltag (oberflächliche Schürfwunden)

Zweckbestimmung

MediGel® ist ein Lipogel zur äußerlichen Behandlung von kleinen Verletzungen im Alltag (oberflächliche Schürfwunden).

Eigenschaften

MediGel® ist ein weißes geruchsloses Lipogel mit hydroaktiven Eigenschaften, das die befeuchtenden Eigenschaften eines Gels mit den pflegenden Eigenschaften einer Creme kombiniert. Es eignet sich sowohl zur Anwendung bei trockenen als auch bei mäßig nässenden Wunden. MediGel® setzt die Prinzipien der feuchten Wundheilung in mehrfacher Hinsicht um und sorgt für eine schnelle Heilung* der verletzten Haut. Natürlich pflegende Öle und Vitamin E unterstützen die Regeneration der geschädigten Haut. MediGel® kann für die ganze Familie, auch bei Kindern und auf sensibler Haut, eingesetzt werden.


MediGel® schafft durch die physikalischen Eigenschaften der Creme folgende Voraussetzungen für eine schnelle Wundheilung*:

- Angenehme Kühlung
- Wiederherstellung eines geeigneten Mikroklimas in der Wunde
- Fördert die Wundheilung
- Verringert die Narbenbildung


Hinweise zur Anwendung

Waschen Sie sich vor und nach der Behandlung einer Wunde die Hände. Vor Behandlung mit MediGel® sollte die Wunde sorgfältig gereinigt werden. Tragen Sie eine etwa 2 mm dicke Schicht MediGel® auf die gereinigte Wunde und über die Wundränder hinaus auf (die Wunde heilt von außen nach innen ab). In den ersten Tagen der Verletzung kann MediGel® mehrmals täglich angewendet werden. Die Anwendung kann in jeder Phase der Wundheilung erfolgen bis zur vollständigen Abheilung. Achten Sie auf eine hygienische Entnahme des Inhalts, so dass die Tubenöffnung nicht mit der Wunde in Kontakt kommt.


Es empfiehlt sich, MediGel® in Verbindung mit einem handelsüblichen Pflaster oder Verbandstoff anzuwenden, dadurch wird die Wunde zusätzlich geschützt.

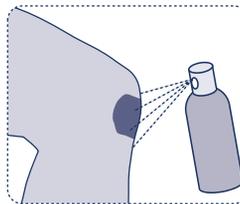


Säubern

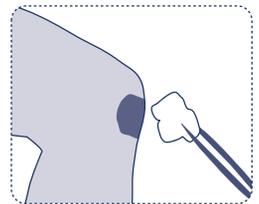

Trocknen

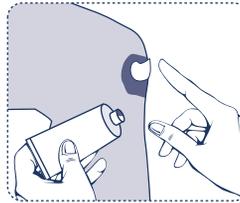

Auftragen

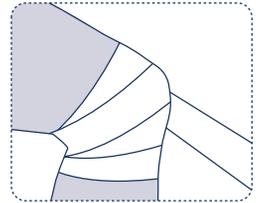

Abdecken

Vorsichtsmaßnahmen

- MediGel® ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmt und darf nicht eingenommen werden.
- Nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion (Hautausschlag) sollten Sie das Lipogel nicht mehr anwenden. Waschen Sie dann bitte das Lipogel sorgfältig mit Wasser ab und wenden Sie sich an einen Arzt.
- MediGel® nicht auf den Augenlidern oder in den Augen anwenden. Falls MediGel® mit den Augen in Kontakt kommt, sollten Sie die Augen mit fließendem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- MediGel® nicht mit silberhaltigen Produkten oder okklusiven Verbandsmitteln kombinieren.
- Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da unter Umständen eine spezielle Behandlung erforderlich ist.

* im Vergleich zur alleinigen Abdeckung mit einem Pflaster bei kleinen Verletzungen im Alltag (oberflächliche Schürfwunden)

- Falls die Wunde sich rötet, schmerzt oder anschwillt oder falls die Wundheilung im Laufe einiger Tage nicht einsetzt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- MediGel® kann die Reißfestigkeit von Kondomen beeinflussen.
- Sie sollten MediGel® nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, falls Sie schwanger sind oder stillen.

Wechselwirkungen

Das Produkt darf nicht mit anderen Cremes oder Salben kombiniert werden.

Nebenwirkungen

Mögliche allergische Reaktionen siehe Abschnitt „Vorsichtsmaßnahmen“. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Apotheker oder dem Hersteller mit.

Hinweis zur Aufbewahrung

- Vor Frost und Hitze schützen! Lagern Sie das Lipogel an einem trockenen Ort und in der Original-Verpackung, nicht unter 5 °C und nicht über 30 °C.
- Schließen Sie die Tube nach der Anwendung. Verwenden Sie hierfür bitte nur den Originaldeckel.
- Verwenden Sie MediGel® nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums.
- Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung (Tube)
2 Jahre nach Herstellung (Sachet)
- Ablauffrist: 90 Tage nach Anbruch (Tube)
Zur Einmalanwendung (Sachet)
- Verwenden Sie bitte keine beschädigten Tuben. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.
- MediGel® soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!

Bestandteile

Trace Element Solution (Aqua dest, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmitate, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Polihexanide, Silica

Packungsgrößen

Tuben zu 5 g, 10 g, 20 g und 50 g sowie Sachet zu 2 g. Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Stand der Information: November 2016

Erläuterung der Symbole auf dem Umkarton



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



beschädigte Tube nicht verwenden



Temperaturbegrenzung



Hersteller



Nur zur Einmalanwendung
(Sachet 2 g)

REV 112016

Hersteller



MEDICE Arzneimittel
Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
D-58638 Iserlohn

Telefon: +49 (0) 2371 937-0
Telefax: +49 (0) 2371 937-329
E-Mail: info@medice.de
www.medice.de