



Penfine®
Classic

Einfach zuverlässig.



swissmade+

mylife™ Penfine® Classic – der Dreh, auf den Sie sich verlassen können.

- Nur zwei Drehbewegungen für einen sicheren Sitz
- Extra-Dünnwand-Kanüle für einen optimierten Medikamentendurchfluss¹
- Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der Nadellängen
- Spezialsilikonisierung für einen verbesserten Injektionskomfort
- Mit allen gängigen Injektionspens kompatibel² und in den Längen 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm erhältlich

Mit Extra-
Dünnwand-Kanüle



Mehr Freiheit. Mehr Lebensfreude. Mit mylife™.


YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS



Extra-Dünnwand-Kanüle

Für einen optimierten Medikamentendurchfluss

Größerer Innendurchmesser bei unverändertem Außendurchmesser³

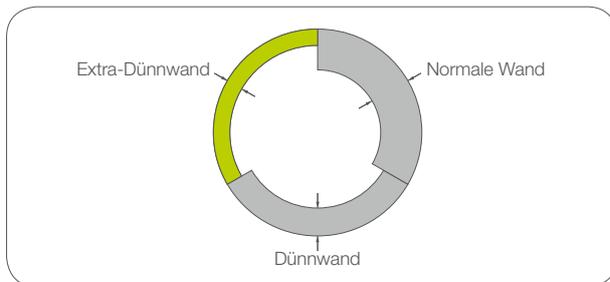


- Verbesserte Medikation durch eine höhere Durchflussrate¹
- Dank des größeren Kanüleninnendurchmessers wird weniger Kraftaufwand beim Drücken des Injektionsknopfs benötigt¹
- Unterstützt die einfache Verabreichung höher konzentrierter Insuline ab 200 Einheiten/mL




Nur zwei Drehbewegungen für einen sicheren Sitz


Die intuitive Methode zur Befestigung der Nadel²

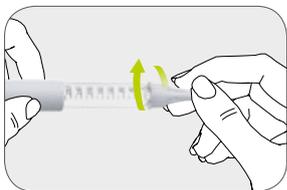

Schrauben Sie die Pen-Nadel auf den Pen.

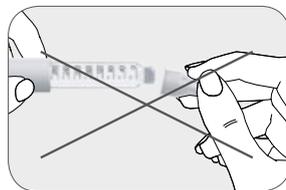

Achten Sie darauf, dass Sie die Pen-Nadel beim Aufschrauben auf den Pen nicht schräg halten.

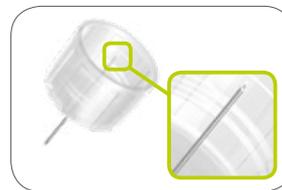

Das Doppelgewinde erlaubt eine schnelle und einfache Fixierung.



Durch Universal Twist passen die Pen-Nadeln auf alle gängigen Injektionspens.²




Premium-Qualität

Für verlässlichen Komfort



Medizinische Kanüle höchster Qualität: Die 4 mm und 6 mm langen Pen-Nadeln besitzen eine superfeine 32G-Kanüle. Dreifacher Präzisions-Facettenschliff und hochwertig geschliffene Nadelspitze.

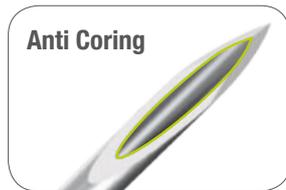

Anti Coring
Die spezielle Behandlung entfernt Unebenheiten, verhindert das Ausfransen der Schliffkante und erlaubt einen sauberen Einstich.



Easy Glide
Die Spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung sorgt für gleichbleibende Gleiteigenschaften und damit für einen sanften Einstich.



Gut greifbare äußere Schutzkappe. Große Abreiblasche für ein schnelles Entfernen der Siegfolie.



Auswahl der richtigen Pen-Nadellänge

Anwenderfreundliche Farbcodierung

Die mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadel gibt es in vier verschiedenen Längen: 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm. Die verschiedenen Pen-Nadellängen mit dem jeweiligen Außen (Gauge)- und Innendurchmesser sind zur einfachen Identifizierung farblich gekennzeichnet.



Produktübersicht

Artikel	Inhalt	Kanüledurchmesser	Nadelspitze	Artikelnummer	PZN
mylife™ Penfine® Classic 4 mm	100 Stk.	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3-fach Schliff	3300001	08527072
mylife™ Penfine® Classic 5 mm	100 Stk.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3-fach Schliff	700009706	13566855
mylife™ Penfine® Classic 6 mm	100 Stk.	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3-fach Schliff	3300002	08527190
mylife™ Penfine® Classic 8 mm	100 Stk.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3-fach Schliff	3300003	08527333



Universal Twist

mylife™ Penfine® Classic passt auf alle gängigen Injektionspens²

Die mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadeln sind nach ISO 11608-2:2012 getestet. Sie sind bei Gebrauch mit den angegebenen Injektionspens auf der Webseite und auf der mylife™ Penfine® Classic Pen-Nadel-Box voll funktionsfähig.

Passt auf folgende Injektionspens:

www.mylife-diabetescare.de/pc/penkompatibilitaet

¹ Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

² Siehe Pen-Nadel-Box oder unsere Website www.mylife-diabetescare.de.

³ Kanülenrohre aus nichtrostendem Stahl zur Herstellung von Medizinprodukten – ISO 9626:2016.

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™**.



Infusionssysteme

Blutzucker-
messsystemeTherapie-
management

Pen-Nadeln

Mit der Marke mylife™ Diabetescare bietet Ypsomed ein umfassendes Portfolio mit Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Diabetes an. Dieses ermöglicht den Anwendern eine einfache, diskrete und zuverlässige Selbstbehandlung. Mit mylife™ Diabetescare wird Selbstbehandlung zur Selbstverständlichkeit.